



ZOLL AED 3 TRAINER

Einführung und Vorstellung


ZOLL®

ZOLL AED 3 Trainer

- Der ZOLL AED 3[®] Trainer wurde so entwickelt, dass er den Betrieb des Echtgerätes genau nachahmt und somit eine realitätsnahes Training der Wiederbelebung bietet.




ZOLL AED 3 Trainer: Real CPR Help

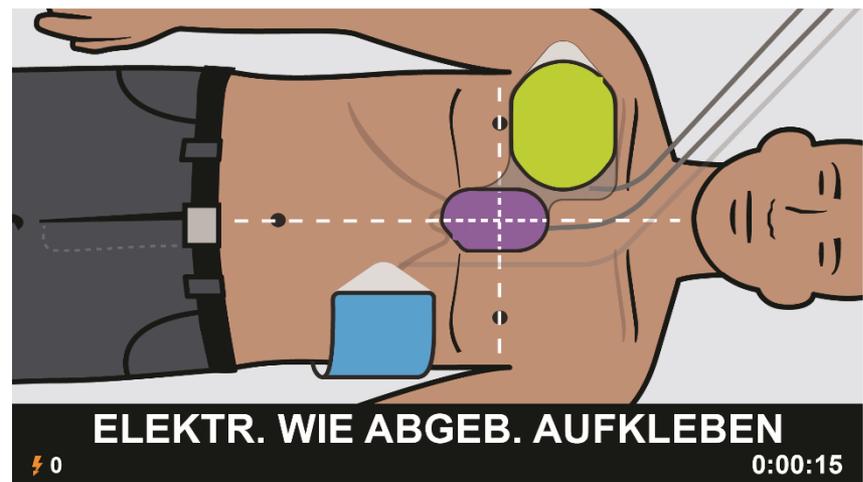


- **Farbiges LCD Display:** Ein LCD-Display mit Vollfarb-Einsatzbildern zeigt, was der Anwender auf einem realen ZOLL AED 3 sehen würde

ZOLL AED 3 Trainer: Real CPR Help

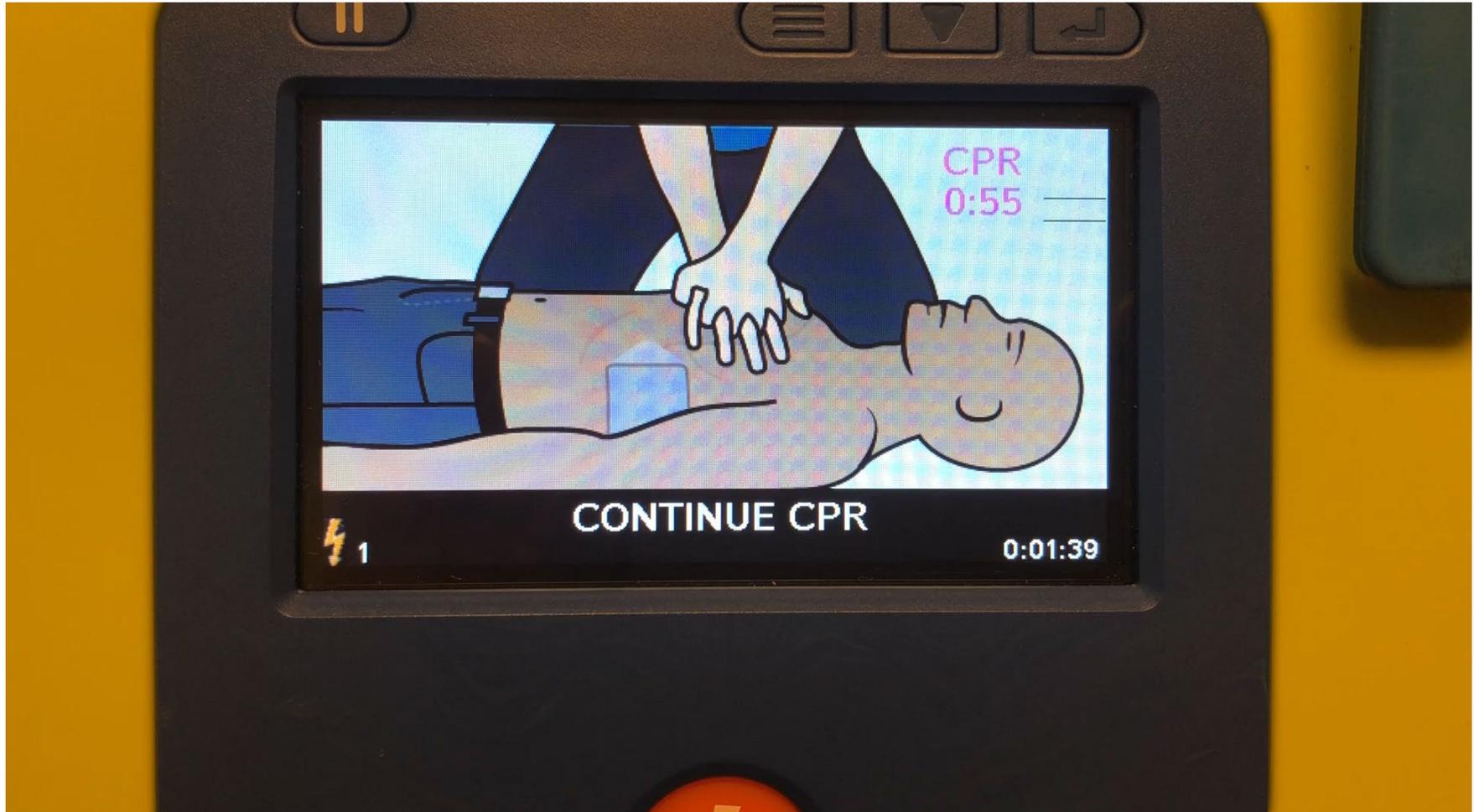


ZOLL AED 3 Trainer: Real CPR Help

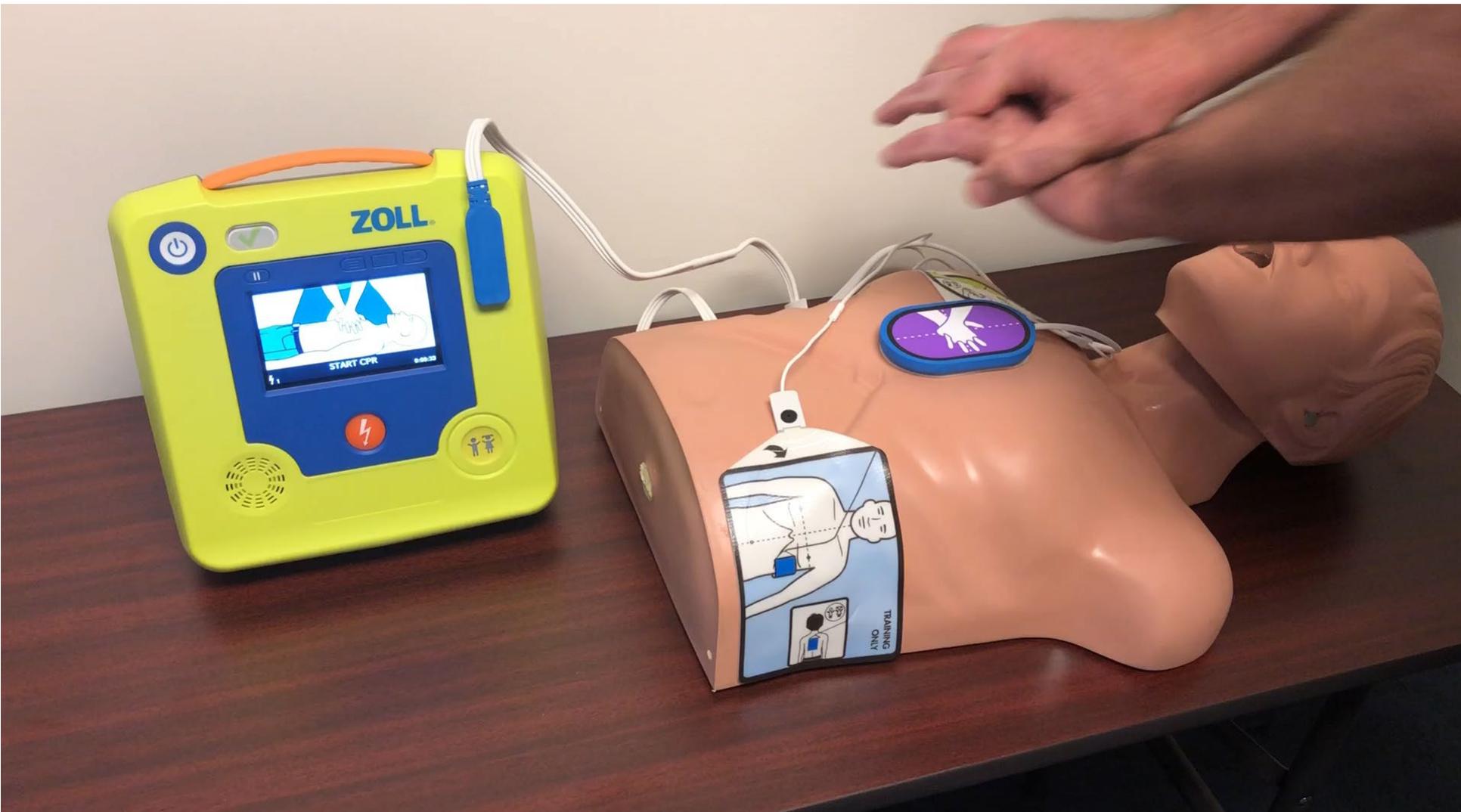

ZOLL AED 3 Trainer: Elektroden

- Automatische Aufklebe-Erkennung:
 - Sobald die Elektroden auf der Puppe platziert werden, erkennt der ZOLL AED 3 Trainer dies und geht weiter zum Punkt "Analyse"
- Langlebige Elektroden
 - ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz[®] Trainingselektroden (für mindestens 100 Übungen).

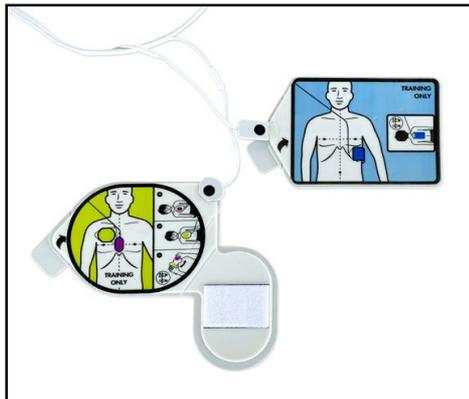

ZOLL AED 3 Trainer: Erkennen der Elektroden auf der Puppe



ZOLL AED 3 Trainer: Weitere Funktionen

- Speicher für mehrere Sprachen (der Trainer kann bis zu drei Sprachen speichern)
- Erwachsenen- und Kindermodus
- Halbautomatisch/Vollautomatisch: ein Trainer für zwei Arten des Gerätes. Der ZOLL AED 3 Trainer kann einfach von einem ZOLL AED 3 Halbautomat zu einem ZOLL AED 3 Vollautomat umgestellt werden



ZOLL AED 3 Trainer: Erwachsenenmodus



ZOLL AED 3 Trainer: Kindermodus



ZOLL AED 3 Trainer: Konfiguration direkt auf dem Gerät

- Die gesamte Konfiguration sowie das Einstellen der Trainingsszenarien wird direkt auf dem Übungsgerät vorgenommen. Die konfigurierbaren Optionen sind:
 - Trainingsszenario
 - Betriebsmodus (halbautomatisch oder vollautomatisch)
 - Anleitung für Ersthelfer
 - Anleitung zur Atemkontrolle
 - Lautstärke der Sprachaufforderungen
 - Sprache



ZOLL AED 3 Trainer: Konfiguration direkt auf dem Gerät



ZOLL AED 3 Trainer: Software Updates über USB

- Wenn die Leitlinien sich ändern, kann der Trainer einfach über einen USB Stick mit der neuen Software upgedated werden
- Auch die Sprache kann durch ein Software Update geändert werden
Änderung des Sprachpakets im entsprechenden Feld



ZOLL AED 3 Trainer: Gerät & Zubehör

- ZOLL AED 3 Trainer Package (Artikelnummer: 8028-000001-08)
 - ZOLL AED 3 Trainer
 - Bedienerhandbuch
 - Uni-padz Trainingselektroden
 - Ersatz-Klebeelektroden für die CPR Uni-padz Trainingselektrode
 - Schutzfolie für die CPR Uni-padz Trainingselektroden
 - 4 Stück Batterien Typ D
- Verfügbares Zubehör:
 - Ersatz ZOLL AED 3 Trainer CPR Uni-padz Trainingselektrode (Artikelnummer: 8028-000010)
 - Ersatz-Klebeelektroden für die CPR Uni-padz Trainingselektrode (Menge: 5; Artikelnummer: 8028-000012)
 - Ersatz-Schutzfolie für die CPR Uni-padz Trainingselektrode (Artikelnummer: 8028-000013)
 - ZOLL AED 3 Trainer USB Software Upgrade Kit (Artikelnummer: 8028-000011-08)